

*Vos premiers pas vers la simulation*



## MegaCode Kelly

Mannequin complet pour la réanimation en équipe




## Megacode Kelly avec VitalSim

Le nouveau Megacode Kelly est un outil incomparable qui donne la possibilité de simuler de manière réaliste des scénarios d'urgence. Il est particulièrement destiné à la formation en équipe en offrant un grand choix d'interventions thérapeutiques

Les signes et symptômes présentés permettent à l'élève de proposer un traitement en fonction du diagnostic suspecté. Grâce à l'électronique du nouveau VitalSim, les signes vitaux les plus significatifs sont disponibles sur le simulateur. Il existe également des sons vocaux préprogrammés en provenance de la tête du mannequin, en plus de la possibilité pour l'instructeur d'utiliser un microphone sans fil avec casque afin de communiquer en temps réel avec les élèves.

Le Megacode Kelly s'adapte à la plupart des interventions médicales d'urgence. Le corps articulé permet un positionnement réaliste du patient. De plus, la qualité de fabrication du mannequin lui garantit une longue durée de vie, même en cas d'utilisation dans des conditions difficiles.

Une télécommande sans fil avec un grand écran à cristaux liquides permet à l'instructeur de garder le contrôle de l'état et de l'évolution du patient et de lancer les scénarios avec transport de la victime

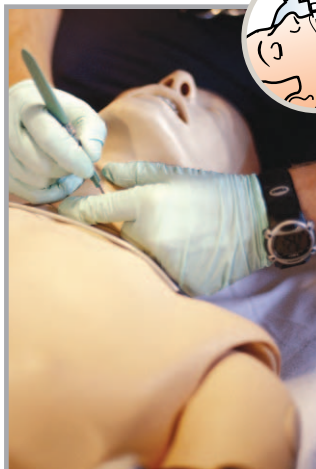

### Gestion des voies aériennes :

- Ballon insufflateur
- Intubation et aspiration oropharyngée et nasopharyngée
- Intubation endotrachéale et nasotrachéale
- Intubation par fibre optique et avec stylet lumineux
- Intubation rétrograde
- Cricothyroïdectomie chirurgicale et par aiguille
- Ventilation par jet trans-trachéal
- Différents oedèmes de la langue
- Auscultation de l'estomac pour vérifier le bon positionnement des voies aériennes
- Décompression d'un pneumothorax



### Sons et voix :


- 13 sons cardiaques différents synchrones avec les ECG
- 8 sons respiratoires différents
- 5 sons gastriques normaux et anormaux
- 9 sons vocaux pré-programmés
- Voix réelle avec l'utilisation du microphone sans fil.

# matière de simulation des paramètres vitaux.




## Techniques cardiologiques:

- Compressions thoraciques
- Environ 1100 exemples d'ECG à 3-4 dérivations
- Défibrillation (25-360 joules) et électro-stimulation externe
- Rythmes en attente programmables
- Pouls carotidien bilatéral
- Pouls brachial et radial

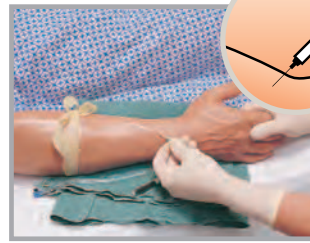

## Accès veineux:

- Ponctions possibles pour la phlébotomie, le passage des drogues et la perfusion
- Accès veineux incluant les veines médianes, basiliques, céphaliques et dorsales de la main
- Sites deltoïde bilatéral, cuisse bilatérale, sous-cutanés et injection intramusculaire

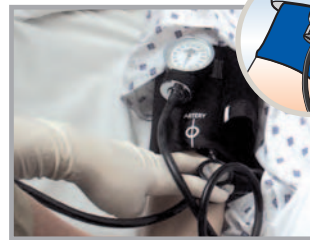

## Tension artérielle:

- Bras articulé pour la prise de tension
- Sons Korotkoff synchrones avec l'ECG
- Pressions systolique et diastolique pouvant être réglées individuellement par tranche de 2 mmHg
- Auscultation des gaps




## Gestion des scénarios / connexion:

- Le logiciel d'édition sur PC permet de générer des scénarios pré-programmés pour une génération d'utilisateurs
- Les enregistrements des élèves peuvent être téléchargés ou imprimés pour le compte rendu ou pour être révisés.
- Le boîtier VitalSim peut être connecté à un PC pour charger jusqu'à 10 nouveaux scénarios pré-programmés et transférer jusqu'à 25 enregistrements d'élèves



# MegaCode Kelly - VitalSim

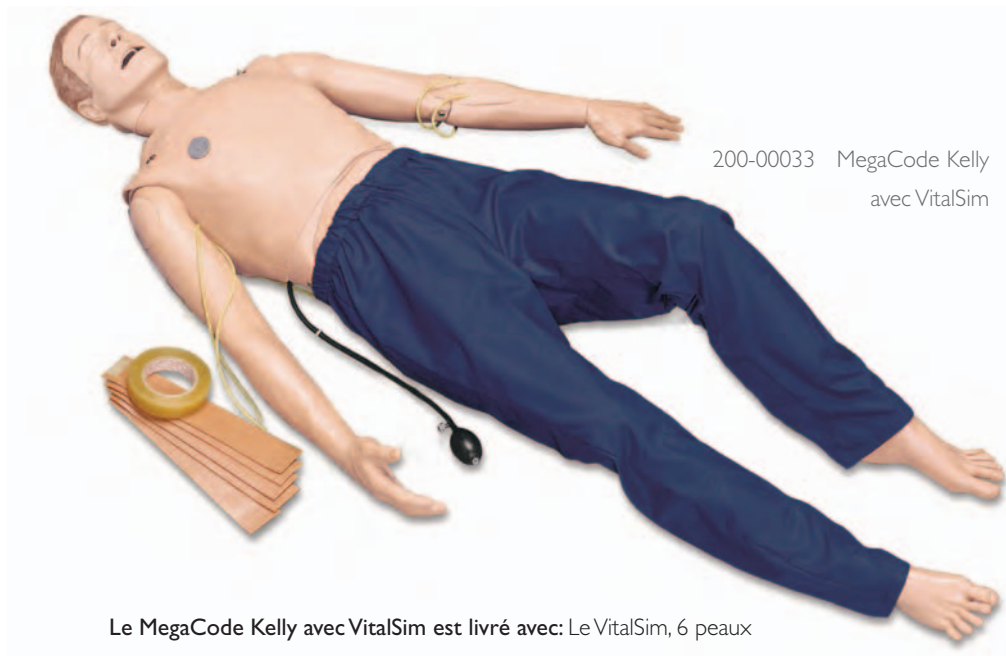

200-00033 MegaCode Kelly  
avec VitalSim

Le MegaCode Kelly avec VitalSim est livré avec: Le VitalSim, 6 peaux de cou, 1 rouleau de membrane pour crico, 1 lubrifiant, 1 veste, 1 pantalon et 1 valise de transport

## Accessoires:

275-00250  
Module Jugulaire  
externe



38 15 00  
Module trauma

## Consommables:

300-00650  
Lubrifiant  
mannequin



38 11 05  
Peau de cou  
(jeu de 6)



200-00250  
rouleau de  
membrane pour  
crico (1 rouleau)



31 20 29  
système de  
remplacement  
peau et veines

**Norway:** LAERDAL MEDICAL AS  
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger  
Tel. +47 51 51 17 00, Fax +47 51 52 35 57  
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

**Australia:** LAERDAL Pty. Ltd. (ABN 47 003 817 490)  
23 Edward Street, Oakleigh, Victoria 3166  
Tel. +61 3 9569 4055, Toll free 1800 331 565  
Fax +61 3 9569 4028, Toll free 1800 635 835  
E-mail: customerservice@laerdal.com.au

**Benelux:** "The Laerdal BeNeLux House"  
Dijkstraat 54, NL-5554 PS VALKENSWAARD  
Tel. +31 40 208 58 00, Fax +31 40 208 58 02  
E-mail: info@laerdal.nl

**Benelux:** Belgium and Luxembourg  
LAERDAL BeNeLux nv  
Mechelsesteenweg 277, B-1800 VILVOORDE  
Tel. +32 2 253 36 96, Fax +32 2 253 36 90  
E-mail: info@laerdal.be

**Canada and Latin America:**  
LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.  
151 Nashdene Rd., Unit #45  
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3  
Tel. +1 (416) 298-9600,  
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)  
ou en français (800) 567-9987  
Fax +1 (416) 298-8016  
E-mail: savelives@laerdal.ca

**Denmark:** LAERDAL DANMARK  
Njalsgade 19 D  
2300 København S  
Tel. +45 80 333 112, Fax +45 80 333 555  
E-mail: laerdal.denmark@laerdal.no

**Eastern Europe:** LAERDAL C.E. EUROPE  
A-1060 Vienna, Mariahilferstr. 1d/1/3  
Tel-Fax +43 15877140, Tel. +43 15815927  
E-mail: mstam@aon.at

**Far East:** LAERDAL Singapore Pte Ltd  
No 1 Marine Parade Central  
#13-05, Parkway Centre Singapore 449408  
Tel. +65 63464259, Fax +65 63467523  
E-mail: customercare@laerdal.com.sg

**Finland:** LAERDAL OY  
Vattuniemenranta 2, 00210 HELSINKI  
Puhelin +358 (0)9-612 99 80,  
Fax +358 (0)9-692 77 99  
E-mail: laerdal.finland@laerdal.no

**France:** LAERDAL MEDICAL FRANCE  
1 rue des Vergers - Bâtiment n° 5 - 69578 Limonest Cedex  
Tel. +33 (0)4 72 52 02 52, Fax +33 (0)4 78 35 38 45  
E-mail: laerdal.france@laerdal.no

**Germany:** LAERDAL MEDICAL DEUTSCHLAND GmbH  
Am Lofefeld 56, 81249 München  
Tel. +49 (0)89 / 864 954-0, Fax +49 (0)89 / 864 34 84  
E-mail: info@laerdal.de

**Italy:** LAERDAL ITALIA s.r.l.  
Via Piero Gobetti 52/2 int.Z. 40129 Bologna  
Tel. +39 051-355587, Fax +39 051-355598  
E-mail: laerdal.italy@laerdal.no

**Japan:** LAERDAL MEDICAL JAPAN KK.  
5F, Ichibancho FS Bldg 8 Ichibancho, Chiyoda-ku,  
Tokyo 102-0082, Japan  
tel: +81-3-3222-8090 fax: +81-3-3222-8091  
E-mail: laerdal.japan@laerdal.co.jp

**Malaysia:** LAERDAL HOSPILINE Sdn Bhd  
12 Jalan Titir 33/25, Section 33, Shah Alam Technology Park,  
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,  
Tel +60 (3) 5122-7002, Fax +60 (3) 5122-5650  
E-mail: customerservice@laerdal.com.my

**New Zealand:** LAERDAL NEW ZEALAND Ltd  
(GST Number 79-403-636)  
Po Box 36339, Merivale, Christchurch  
Tel. +61 3 9564 4066, Toll free 0800 523 732  
Fax +61 3 9563 3368, Toll free 0800 528 852  
E-mail: customerservice@laerdal.co.nz

**Portugal:** LAERDAL ESPANA, Sucursal em Portugal  
Rua da Bela Vista à Graca, no.31 A. Escritorio 9,  
1170-054 Lisboa  
Tel. (+351)-21-816-6567, Fax (+351)-21-816-6568,  
Mob. (+351)-918765367

**Spain:** LAERDAL ESPANA, S.L.  
Manuel Tovar 19, 28034 Madrid  
Tel. (+34) 902-291110, Fax (+34) (91)-7291125  
E-mail: laerdal.spain@laerdal.no

**Sweden:** LAERDAL MEDICAL AB  
Box 2064, Paviljongvägen 5, 132 02 Saltsjö-Boo  
Tel. +46 (0)8-55614610, Fax +46 (0)8-55614619  
E-mail: kontakt@laerdal.se

**United Kingdom:** LAERDAL MEDICAL LTD.  
Laerdal House, Goodmead Road, Orpington,  
Kent BR6 0HX  
Tel. +44 (0)1689 876634, Fax +44 (0)1689 873800  
E-mail: customerservice@laerdal.co.uk

**USA:**  
LAERDAL MEDICAL CORPORATION  
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840  
Wappingers Falls, New York 12590-8840  
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770  
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545  
E-mail: customerservice@laerdal.com

**LAERDAL TEXAS**  
P.O. Box 38, 226 FM 116 South  
Gatesville, Texas 76528-0038  
Tel. (800) 433-5539, (254) 865-7221  
Fax (254) 865-8011  
E-mail: customerservice@laerdaltx.com



**Laerdal**  
helping save lives